



PAQUETE PARA CIRUGÍA GENERAL UNIVERSAL

Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Uso exclusivo dentro del quirófano.

3 Batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande.

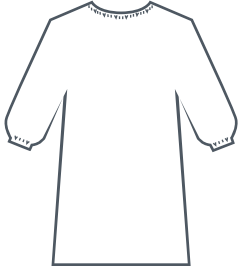

1 Bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano.

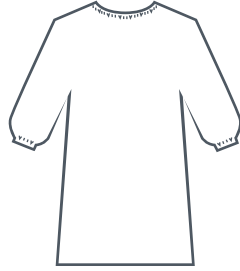

1 Sábana superior.



150 x 190 cm +/- 10 cm

1 Sábana lateral.



130 x 180 cm +/- 10 cm

1 Funda mesa mayo.



50 x 140 cm +/- 10 cm

1 Sábana inferior.



170 x 190 cm +/- 10 cm

1 Cubierta mesa riñón.



240 x 150 cm +/- 10 cm

4 Campos sencillos.



90 x 90 cm +/- 10 cm

1 Sábana hendida.



180 x 240 cm +/- 10 cm

4 Toallas absorbentes.



40 x 40 cm ± 5 cm

CONTENIDO:

- Tres batas quirúrgicas para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho, tamaño grande.
- Una bata quirúrgica para instrumentista, puños ajustables, tamaño mediano.
- Cuatro campos sencillos de **90 x 90 cm +/- 10 cm**
- Una sábana superior de **150 x 190 cm +/- 10 cm**
- Una sábana inferior de **170 x 190 cm +/- 10 cm**
- Una sábana lateral de **130 x 180 cm +/- 10 cm**
- Una sábana hendida de **180 x 240 cm +/- 10 cm**
- Una cubierta para mesa de riñón de **240 x 150 +/- 10 cm**
- Una funda de mesa mayo de **50 x 140 cm +/- 10 cm**
- Cuatro toallas absorbentes de **40 x 40 cm +/- 5 cm**

ESTERITAM

Tipo de insumo para la salud Artículo 262 LGS	V. Materiales quirúrgicos y de curación.
Clasificación de insumo	Clase 1
Registro sanitario	2842C2017SSA
Material	Polipropileno
Gramaje	N/A
Peso del producto	860 g
Empaque primario	Bolsa papel-plástico para esterilización
Empaque colectivo	Caja de cartón
Piezas en empaque colectivo	20 pzs.
Peso empaque colectivo	23.6 kg
Método de esterilización	Óxido de etileno
Clave SAT	42131700
Unidad SAT	H87
Código interno del producto	ES792
	No reutilizar
	Proteger de la luz
	No usar si la bolsa está rota
	No exponer a los rayos del sol



*Advertencia: El uso entre pacientes puede provocar contaminación cruzada.

Hecho en México por: ESTERITAM S.A. DE C.V.
 R.F.C. EST170714MS9 DOMICILIO: Av. Laureles No. 780, Col. Parque Industrial Belenes Norte, C.P. 45145, Zapopan, Jalisco.
 Tels. (33) 36 24 64 44 y (33) 36 24 64 45 www.esteritam.com

Ghmedic



REV.00